



## Opis

### Soczewki DAILIES AquaComfort Plus



#### Jednodniowe soczewki kontaktowe dla wyraźnego widzenia i odświeżającego komfortu przez cały dzień<sup>1</sup>.

Jednodniowe soczewki DAILIES AquaComfort Plus to bezpieczny i łatwy sposób użytkowania soczewek kontaktowych.

Codziennie rano zakładasz nową, świeżą parę jednodniowych soczewek kontaktowych DAILIES AquaComfort Plus i nie musisz się martwić o ich czyszczenie, dezynfekcję czy też przechowywanie. Zdejmujesz je i wyrzucasz, zanim na ich powierzchni zdążą się zgromadzić drażniące osady. Jest to prosty i wyjątkowo higieniczny sposób na poprawę jakości widzenia osób z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością.

#### Zaprojektowane dla nowoczesnego stylu życia.

Nacisk wywierany na soczewkę przez powiekę powoduje uwalnianie na jej powierzchni niewielkiej ilości środka nawilżającego<sup>2</sup>.

Unikalny materiał na bazie PVA, nelfilcon A, wspiera wydłużenie czasu zerwania filmu łzowego i redukuje suchość dzięki dobrej charakterystyce zwilżalności powierzchni<sup>2</sup>.

PVA jest związkiem nawilżającym, częstym składnikiem kropli nawilżających

HPMC dodana do blistra daje komfort początkowy jak krople nawilżające;

PEG uwalniany jest dla komfortu na początek dnia;

PVA współdziała z PEG w celu zapewnienia komfortu przez cały dzień<sup>3,4\*</sup>


Uwalniane z soczewek w trakcie ich noszenia związki nawilżające zapewniają odświeżający komfort przez cały dzień, już od pierwszego mrugnięcia<sup>1\*</sup>

Uwalnianie związków nawilżających przy każdym mrugnięciu zapewnia stabilizację filmu łzowego, co wspiera dobre widzenie i komfort przez cały dzień<sup>1\*</sup>

Dzięki poprawie stabilności filmu łzowego soczewki te są doskonałym wyborem podczas wyzwań nowoczesnego trybu życia i przy objawach sezonowej alergii oczu<sup>5</sup>.



#### SYSTEM NAWILŻAJĄCY AKTYWOWANY MRUGANIEM

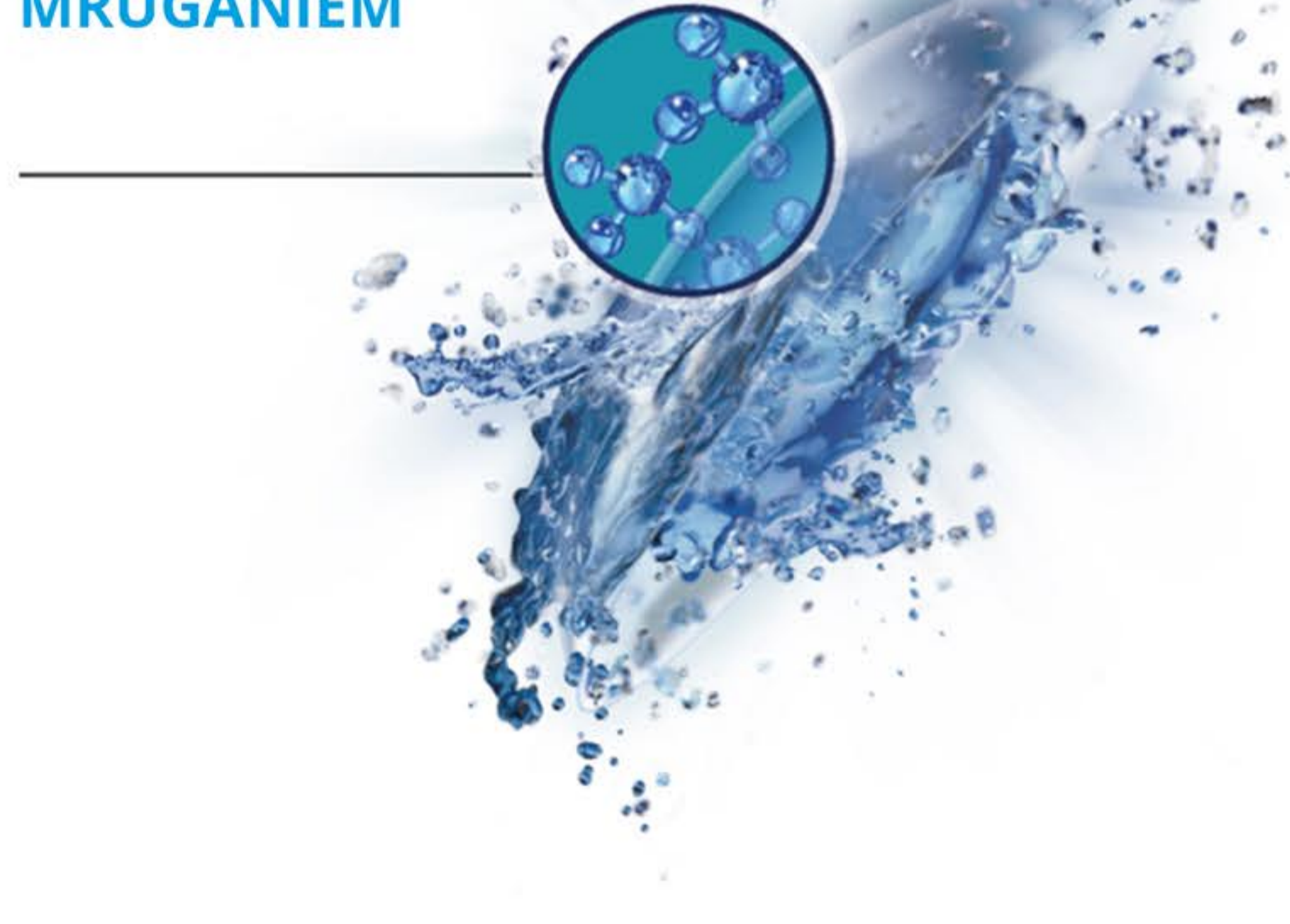

#### 3 ZWIĄZKI NAWILŻAJĄCE

HPMC daje natychmiastowy efekt kropli nawilżających, PEG i PVA współdziałają, dając komfort w ciągu dnia<sup>3,4</sup>.

#### SYSTEM NAWILŻAJĄCY AKTYWOWANY MRUGANIEM

Związki nawilżające uwalniane są przy każdym mrugnięciu i stabilizują film łzowy<sup>1</sup>.

#### STABILNY FILM ŁZOWY

Stabilność filmu łzowego wspiera dobre widzenie.



Klimatyzowane, ogrzewane pomieszczenia



Praca przy komputerze



Sezonowe alergie oczne

#### Informacje techniczne

**Produkcja:** Nowoczesny proces odlewania w formie LightStream Technology

**Materiał:** Nelfilcon A

**System nawilżający:** Unikalny system nawilżający o potrójnym działaniu, aktywowany mruganiem:

- hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)
- glikol polietylenowy(PEG)
- alkohol poliwinylowy(PVA)

**Dk/t (@-3,00 D):** 26

**Uwodnienie:** 69%

**Krzywizna bazowa BC (mm):** 8,7

**Średnica (mm):** 14,0

**Moce sferyczne (D):** od +8,00 do +6,50 co 0,50; od +6,00 do +0,25 co 0,25; od -0,50 do -6,00 co 0,25; od -6,50 do -15,00 co 0,50


**Grubość centralna (mm):** 0,10 @ -3,00 D

**Tryb wymiany:** jednodniowy

**Tryb noszenia:** dzienny

**Wielkość opakowania:** 30 lub 90 sztuk

#### ZAKŁADANIE SOCZEWEK

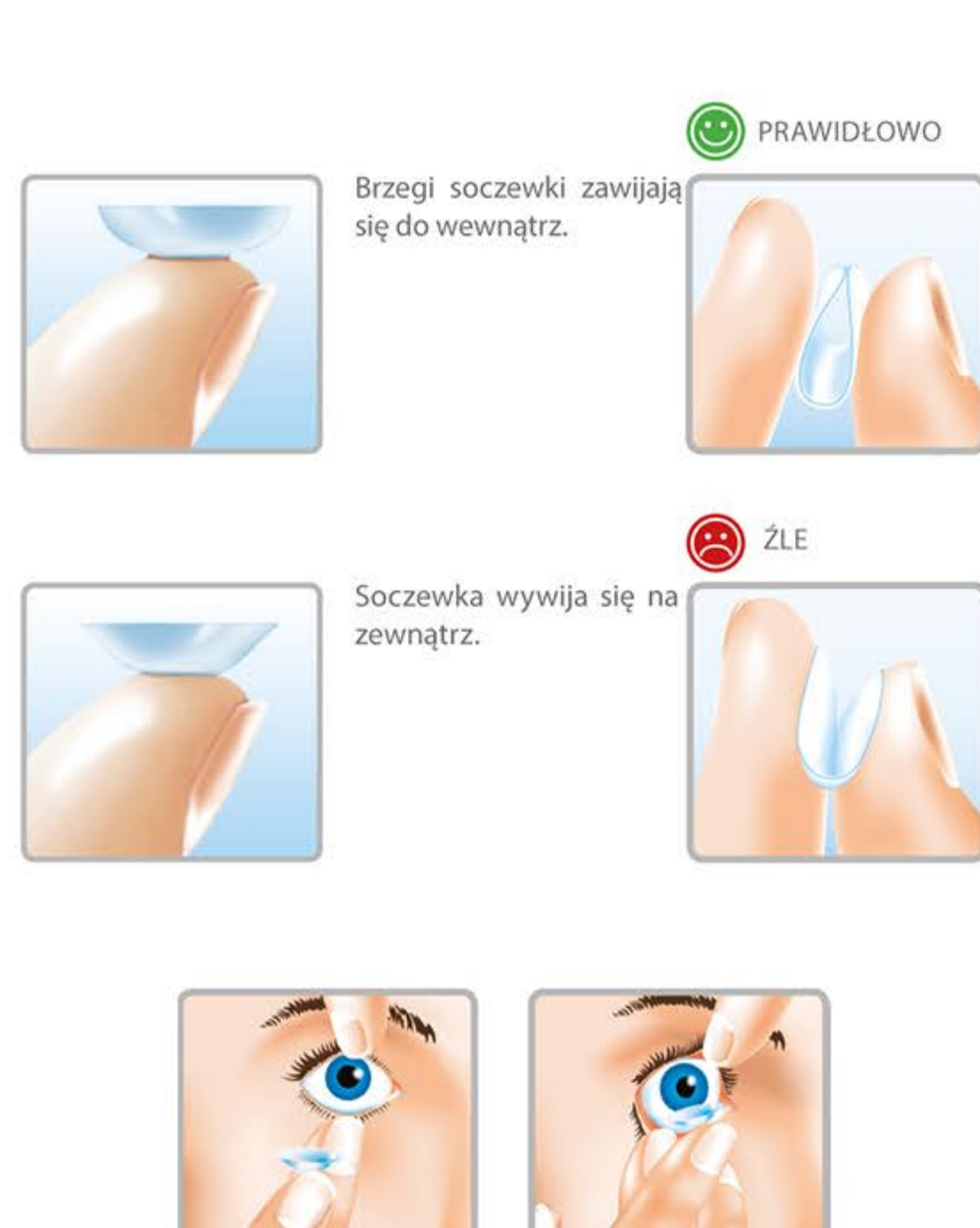

#### ZDEJMOWANIE SOCZEWEK



#### Piśmiennictwo:

1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of 'comfort-enhanced' daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2010; 33(2): 88-92.
2. Nick J., Winterton L., Lally J. & Long B. (2006) Lubricating Lens Focuses on Patient Comfort.
3. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of (vinyl alcohol) from a contact lens: The realization of a time release moisturizing agent/artificial tear. J
4. Pruitt, Lindley and Winterton. Triple-action moisterisers for increased comfort in daily disposable lenses. Optician, 2007; 16.11: 27-28. 5. Dane Alcon, 2013.
5. Dane Alcon, 2013.

^ Na podstawie sferycznych soczewek DAILIES® AquaComfort Plus®.

**Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.**

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenia niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.\*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czymś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym - uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

\*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.